



UTILISATION

Masque pour protection du porteur et de son environnement - type 2R - 6 couches protectrices

MATIERES

- 4 couches - Tissu 100% Polyester poids 95g/m²
- 1 couche - Non tissé 100% Polyester poids 73g/m²
- 1 couche - Pellicule 100% Polyuréthane

DESCRIPTION

- Masque lavable (50 fois), conseillé pour une seule personne
- Plissé (3 plis)
- Fixation auriculaire élastique
- Réglage possible pour le nez
- Structure protectrice composée de 6 couches
- Antibactérien
- Disponible avec différentes motifs

Les masques évitent la propagation des particules émises par la personne qui le porte (salives, mucus, etc.) vers l'environnement ou les personnes qui les entourent. Les masques protègent également les personnes qui le portent des éjections de sang et/ou fluides corporels.

INSTRUCTION D'UTILISATION pour usage en bloc opératoire

Le masque doit être lavé et stérilisé avant d'être porté
Lavage à la machine à 40°C - séchage au sèche-linge
Stérilisation à 134°C max pendant 3 min

Normes/Certifications

- Norme EN 14683:2019+AC:2019 - ISO 22609:2004
- Marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE
- Dispositif Médical Classe 1 - Type IIR

Efficacité de filtration bactérienne BFE : 99,8%
Respirabilité (pression différentielle) : 54 Pa/cm²
Propreté microbienne (ufc/g) Bioburden : <=30
Résistance aux éclaboussures : 21,3 kPa


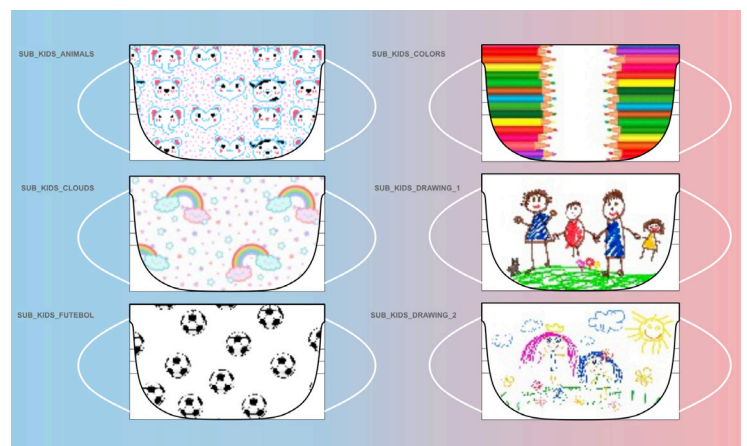


Schéma du produit

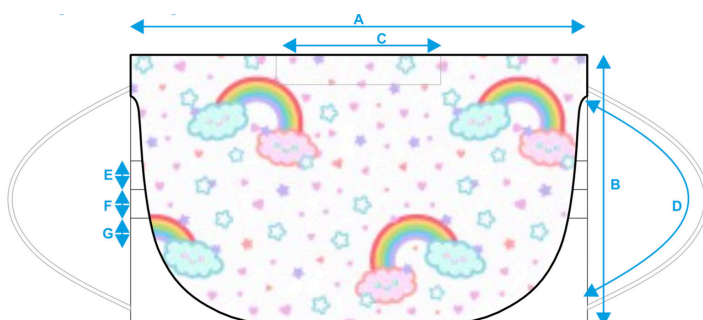

- A** Largeur 16 cm
- B** Hauteur 9,5 cm
- C** Réglage nez 8 cm
- E/F/G** Hauteur de pli 1 cm
- D** Élastique 15,5 cm